

Kurzanleitung für den VARIOKLAV Dampfsterilisator Typ 25 T mit Mikroprozessorsteuerung

Die Kurzanleitung gilt nur in Verbindung mit der ausführlichen Betriebsanleitung für den VARIOKLAV Dampfsterilisator Typ 25 T.

GEFAHR!
Lesen Sie die ausführliche Betriebsanleitung durch, bevor Sie das Sterilisiergerät einschalten.
Benutzen Sie das Sterilisiergerät nur für die in der Betriebsanleitung angegebenen Sterilisiergüter.

1. Sterilisiervorgang vorbereiten

ACHTUNG!
Überprüfen Sie vor der Sterilisation, ob sich genügend Speisewasser im Vorratstank befindet.

- ◆ Netz einschalten: Grüne START/STOP-Taste (19) drücken.
- ◆ Sterilisierkammer und Sterilisiergut vorbereiten.
- ◆ Sterilisierkammer beschicken.

2. Programm wählen

GEFAHR!
Flüssigkeiten in druckdicht verschlossenen Behältnissen dürfen nur in Geräten mit Schnellrückkühlung im Programm „Flüssigkeiten RG“ sterilisiert werden. Explosionsgefahr!
Gefahr durch Splitter! Verbrühungsgefahr!

HINWEIS
Detaillierte Empfehlungen für die Sterilisiergüter: siehe ausführliche Betriebsanleitung.

- ◆ Wählen Sie das gewünschte Sterilisierprogramm über eine der Programmtasten P₁, P₂ oder P₃. (18)

Für den aktuellen Sterilisiervorgang können Sie die Temperatur- und Zeitwerte kurzfristig ändern:

- ◆ Sterilisierzeit ändern: ▲-Taste oder ▼-Taste drücken.
- ◆ Sterilisiertemperatur ändern: Programmtaste gedrückt halten und ▲-Taste oder ▼-Taste drücken.

Die Optionen Hupe und Drucker können Sie für den aktuellen Sterilisiervorgang zu- oder abschalten.

- ◆ Option zu- oder abschalten: entsprechende Taste drücken (21 oder 26).

(Werte dauerhaft ändern bzw. Optionen dauerhaft zu- oder abschalten: siehe ausführliche Betriebsanleitung)

3. Timer einstellen

Wenn Sie die Sterilisation nicht sofort starten wollen, können Sie den Timer einschalten.

- ◆ Timer-Taste (23) drücken.

Zum ändern der Timer-Werte (siehe auch ausführliche Betriebsanleitung):

- ◆ Timer-Taste (23) gedrückt halten und grüne START/STOP-Taste (19) drücken.
- ◆ Werte einstellen: Unter dem Wert liegende Programmtaste (18) gedrückt halten und ▲-Taste oder ▼-Taste drücken.
- ◆ Bestätigen: START/STOP-Taste (19) drücken.

4. Programm starten


- ◆ Tür schließen.
- ◆ Grüne START/STOP-Taste (19) drücken.

5. Programm beenden

GEFAHR!
Öffnen Sie die Sterilisierkammer nicht, bevor das Entnahmesignal gegeben wird.
Gefahr durch heißen Dampf oder heißes Wasser!
Verbrühungsgefahr!
Treten Sie beim Öffnen vom Sterilisiergerät weg.
Tragen Sie Schutzkleidung (Schurz, Brille, Handschuhe).

ACHTUNG!
Kontrollieren Sie vor dem Öffnen, ob der angezeigte Druck (13) unter den eingestellten Entnahmedruck (Werkseinstellung 110 kPa) gesunken ist.

- ◆ Grüne START/STOP-Taste (19) drücken.
- ◆ Sterilisierkammer öffnen.
- ◆ Sterilisiergut entnehmen.

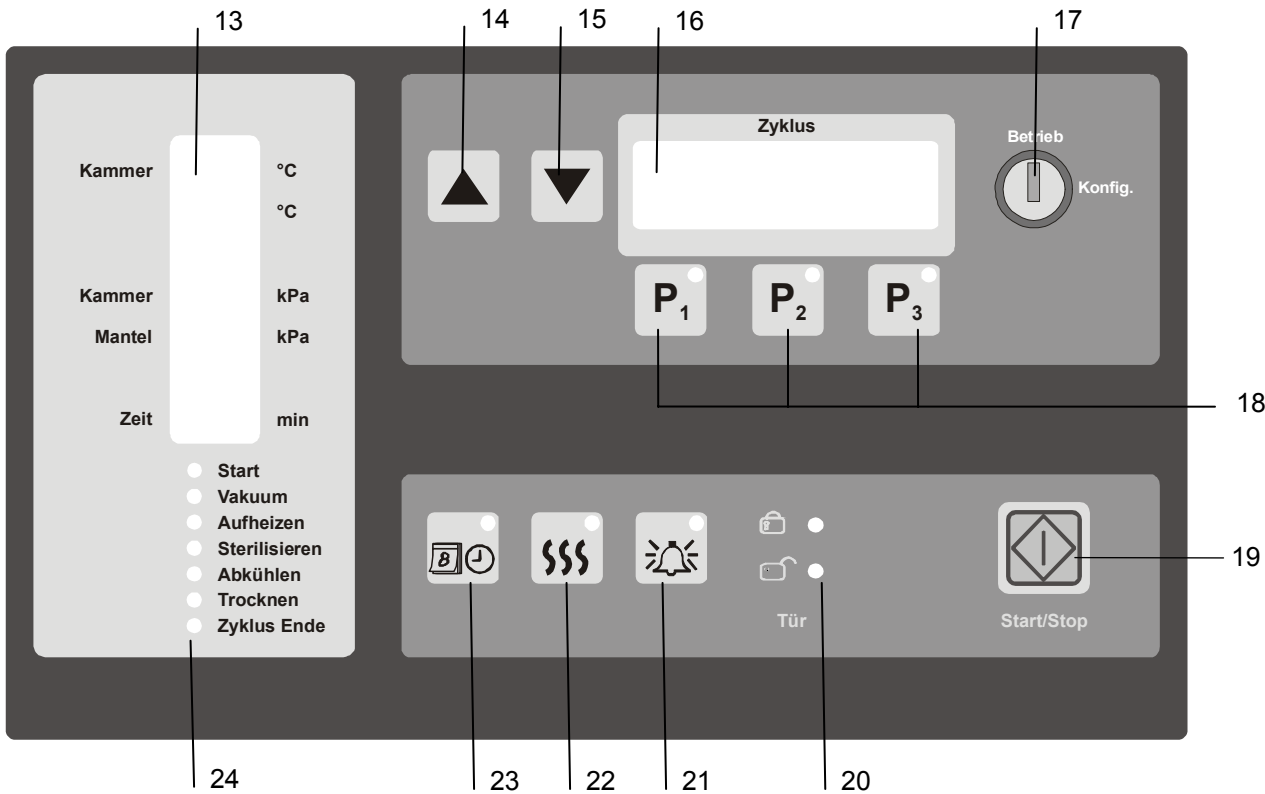

In der Zyklusanzeige (16) erscheinen Sterilisiertemperatur, Sterilisierzeit und die Programmbezeichnung.

Die Sterilisation startet nach drücken der START/STOP-Taste (19) nicht sofort, sondern am angegebenen Tag zur angegebenen Uhrzeit.

Die Tür wird verriegelt. Das Sterilisierprogramm startet. Bereits abgelaufene Phasen des Programmzyklus werden angezeigt (24).

Bei Programmende blinkt die grüne START/STOP-Taste (19), und es ertönt ein Hupsignal.

Das Hupsignal wird abgeschaltet. Das Sterilisierprogramm ist beendet. Die Tür wird entriegelt. Die Anzeigen des Bedienfeldes schalten nach 10 min. ab.

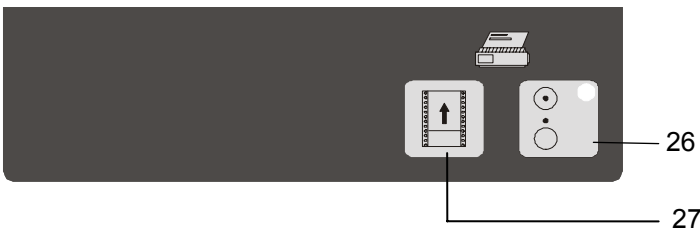


Bild 2: Bedienfeld Einbaudrucker (Option)

- 13 Anzeige aktuelle Werte
- 14 ▲-Taste
- 15 ▼-Taste
- 16 Zyklusanzeige
- 17 Schlüsselschalter
- 18 Programmtasten
- 19 Grüne START/STOP-Taste
- 20 Anzeige Tür
- 21 Taste akustisches Programmendesignal (Hupe)
- 22 TasteVorwärmen (Option)
- 23 Taste Timer (Zeitschaltuhr)
- 24 Anzeige Sterilisierphasen
- 26 Drucker EIN/AUS-Taste (Option)
- 27 Taste Papiervorschub (Option)